

## DAZA 4020 Türkontakte Set




### 1 Sicherheitshinweis

Vor Inbetriebnahme und Gebrauch sollte diese Anleitung komplett gelesen werden. Sie ist zur späteren Wiederverwendung aufzubewahren. Bei Produkt-, Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

### 2 Montage


**Achtung:** Um zu verhindern, dass der Patient den Türkontakt selbst ausschaltet, sollte dieser an der Außenseite der Tür montiert werden.

1. Befestigen Sie den unteren Teil mit Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder Klettband am Türrahmen.
2. Setzen Sie nun die Platine zuerst in die dafür vorgesehene Halterung (Platinenstützen) ein.
3. Drücken Sie die Platine dann beim Befestigungsclip an.
4. Die Abdeckung nun so montieren, dass keine Anschlussdrähte eingeklemmt werden.

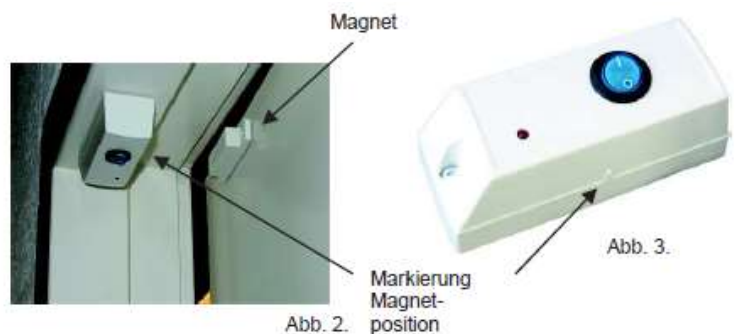

### 3 Anschluss an die Rufanlage

Schließen Sie den Empfänger gemäß nachfolgendem Schema an:

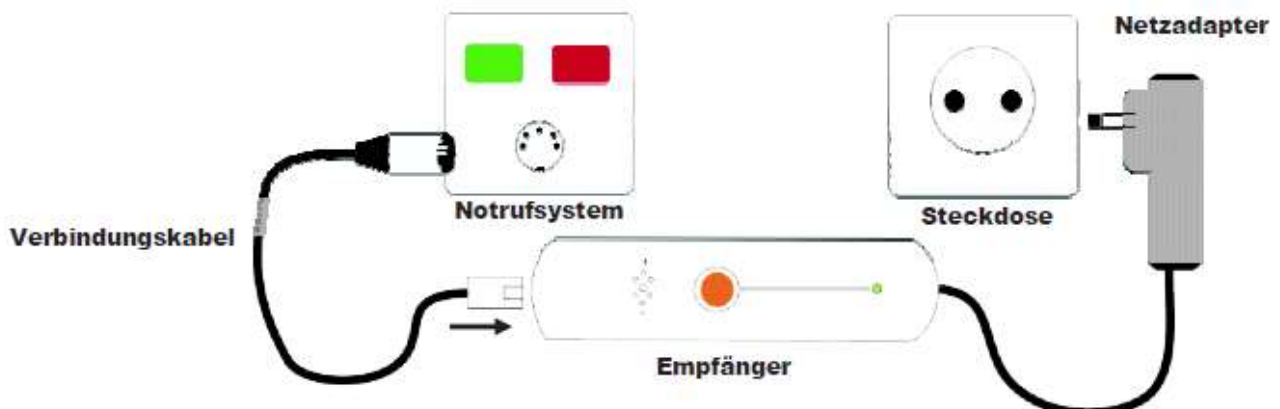

## 3 Anschluss an die Rufanlage

Verbinden Sie zuerst das Rufanlagen-Kabel mit der Steckdose an der Rufanlage.

Nun verbinden Sie das Netzgerät mit der Steckdose.

Einige Sekunden, nachdem der Empfänger mit der Steckdose verbunden wurde, schaltet sich dieser selbst ein.

## 4 Inbetriebnahme

Die orange Taste am Rufempfänger hat bei diesem Set keine Funktion.

Verlassen Sie nach Montage des Türkontakts und Anschluss des Rufempfängers den Raum.

Aktivierung: Schalten Sie nun bei geschlossener Türe den Türkontakt ein (Stand 1)

Deaktivierung: Schalten Sie den Türkontakt vor dem Öffnen der Türe aus (Stand 0)

## 5 Batteriewechsel

Wenn die LED am Rufempfänger im Abstand von 2 Sekunden rot blinkt, sollte die Batterie ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur eine 3 Volt-Lithiumzelle der Größe CR2 ½ AA.

**Nur bei Verwendung einer Original-Batterie kann eine ordnungsgemäße Funktion garantiert werden.**  
(Best.-Nr. 1183)

Achten Sie beim Einlegen der Batterie unbedingt auf die Pole!

## 6 Set Hinweis

Sie erhalten bei Lieferung immer ein Set. Sollten Sie mehrere Sets im Einsatz haben, erkennen Sie die Zusammengehörigkeit an den Typenschildern – (gleiche Seriennummern):



**ACHTUNG:** Die Geräte sind untereinander nicht austauschbar.

## 7 Entsorgungshinweis



Elektroaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und beispielsweise bei einer Sammelstelle der Gemeinde / des Stadtteils abzugeben. Diese werden dort angenommen und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt. Elektrogeräte sind mit dem voranstehenden Symbol gekennzeichnet und können Schadstoffe enthalten, die sich möglicherweise negativ auf Ihre Gesundheit und die Umwelt auswirken. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung unterstützen Sie den Schutz der menschlichen Gesundheit und leisten Ihren Beitrag zur Entlastung der Umwelt.